


ヘバーデン結節・ブシャール結節用テープ

102HB

・ヘバーデン結節とは手の指の第1関節が太く変形し、痛みが生じる病気です。



・ブシャール結節とは手の指の第2関節が太く変形し、痛みが生じる病気です。

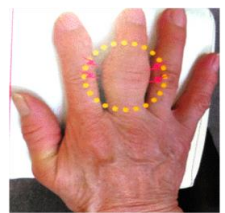

これらを放置するとさらに変形が進み、他の指や足の関節に転移する場合があります。

特徴

- ①レーヨン基材のヘバーデン結節・ブシャール結節用テープです
- ②固定用の添え木を長くすることによりヘバーデン結節とブシャール結節が発生している箇所を同時に固定が可能です
- ③添え木で固定することによりヘバーデン結節・ブシャール結節での変形を防ぎ、自己治癒力を最大限にし、痛みや炎症を改善させます
- ④はっ水処理したレーヨン基材や水で剥げづらい粘着剤を使用することにより水回りにも使用可能です

用途

ヘバーデン結節・ブシャール結節の治療用

構造



特性

製品名	構成	基材厚み (mm)	添え木厚み (mm)	基材サイズ (mm)	添え木サイズ (mm)	
102HB	レーヨン/アクリル粘着剤/添え木/剥離紙	0.3	0.44	45×80	23×44	
製品名	伸び率[単位:%]		引張強度[単位:N/10mm]		特徴	注意事項
	短辺方向	長辺方向	短辺方向	長辺方向		
102HB	49	70	149	81	はっ水性、低伸縮性、通気性、吸湿性	受注生産

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 本製品の使用中に皮膚障害(発疹・発赤、水疱、皮膚はく離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行って下さい。
- 上記は開発品であるため仕様が変更される場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

改訂:2021年2月

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>